

Gebrauchsanweisung

Produktbezeichnung: Nackenband, Nackenkissen



 **Savaria-Dent Kft**
H-9700 Szombathely
Dr. Szabolcs Z. u. 5/A.
HUNGARY
Tel.: +36 94/505-840



Anlegen

Verwendungszweck: Medizintechnisches Gerät, in die Risikoklasse I eingestuft, das mit Zahnsparren verbunden als Verankerung für die Zugelemente dient. Pro Seite Zugkraft bis zu einer Belastungsgrenze von max. 2,5 kg, darüber lösen sich die Zugelemente aus den Sicherheitsmodulen.

Indikation

Das Produkt kann im Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung auf fachärztliche Empfehlung verwendet werden.

Kontraindikation


Beim Tragen der Kopfkappe auftretende allergische Reaktionen.

Material: 100 % Baumwolle

Waschen ist bis 40 °C mit im Handel erhältlichen, für Baumwollstoffe geeigneten allgemeinen Waschmitteln möglich.

Das Produkt darf nicht weiter benutzt werden, wenn in seinem Material oder entlang der Nähte Risse oder Verschleiß zu erkennen sind.

Schwerwiegende unerwartete Ereignisse, die mit dem Gerät zusammenhängen, müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde desjenigen Mitgliedstaats, in dem der Nutzer und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

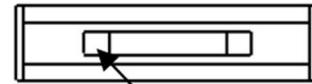

Anschlusspunkt für das Sicherheitsmodul

Version: 3.0 – 01.07.2021

Nackenband, Nackenkissen

Produktliste

Bestellcode	Handelsbezeichnung	Bestellcode	Handelsbezeichnung
SD 48160	Polster + <u>Strap</u> , breite Schlaufen	SD 48167	<u>Ohrband</u> , schwarz
SD 48161	Jeans- <u>Strap</u> , schmale Schlaufen	SD 48170	Polster + <u>Strap</u> , schmale Schlaufen
SD 48162	<u>Strap</u> , breite Schlaufen	SD 48171	Polster + <u>Strap</u> , breite Schlaufen
SD 48162-L	<u>Strap</u> , breite Schlaufen L	SD 48173	Polster, blau + <u>Strap</u> , pink, schmale Schlaufen
SD 48162-XL	<u>Strap</u> , breite Schlaufen XL	SD 48174	Polster, blau + <u>Strap</u> , gelb, schmale Schlaufen
SD 48163	<u>Strap</u> , schmale Schlaufen	SD 48181	Jeans bunt, breite Schlaufen
SD 48163-L	<u>Strap</u> , schmale Schlaufen L	SD 48182	Jeans bunt, schmale Schlaufen
SD 48163-XL	<u>Strap</u> , schmale Schlaufen XL	SD 48186	Jeans bunt, Jeans, schmale Schlaufen
SD 48164	Polster, Knopflöcher	SD 48187	Jeans bunt, Jeans, breite Schlaufen
SD 48166	<u>Ohrband</u> , blau		